

# INJECTION PAD

MADE IN JAPAN



OPATRUNEK ZABEZPIECZAJĄCY MIEJSCE NAKŁUCIA

CE  
2797

MEDICAL DEVICE

STERILE

EO



- Odpowiednia kompresja i ochrona
- Unikatowe opakowanie ze zintegrowaną wkładką rozdzielającą dla prostej obsługi
- Pojedynczo pakowane i sterylizowane.

Opatrunki samoprzylepne z podkładkami hemostatycznymi: wkłady wykonane z włókny celulozowej; plastry wykonane są z włókny celulozowo-poliestrowej z klejem akrylowym.

## Specyfikacje

Kod produktu	Rozmiar		w pudełku
	Plaster	Wkładka	
Biały No.30	30mm $\varnothing$	10mm $\varnothing$	120 szt
Biały No.36	36mm $\varnothing$	16mm $\varnothing$	100 szt
Beżowy No.30A	30mm $\varnothing$	10mm $\varnothing$	120 szt
Beżowy No.36A	36mm $\varnothing$	16mm $\varnothing$	100 szt



# Higieniczna aplikacja bez dotykania podkładki i powierzchni klejącej.

## Cechy

### Wkład chłonny


Odpowiedni efekt kompresji

Podkładka z włókniny o grubości 3 mm zapewnia dobry efekt kompresji i dobre wchłanianie krwi.

### Plaster

Delikatny dla skóry

Hipoalergiczny plaster samoprzylepny jest delikatny dla skóry. Dobrze przylega i utrzymuje wkład w odpowiedniej pozycji podczas użytkowania.

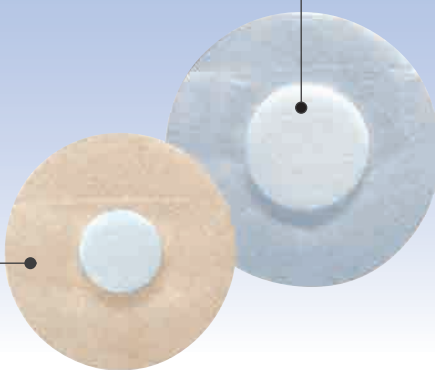

### Opakowanie

Higieniczne pakowanie

Główna warstwa jest zintegrowana z opakowaniem, a złożona, mała warstwa, która pokrywa powierzchnię samoprzylepną, jest łatwa do trzymania, co ułatwia obsługę bez dotykania wkładu i powierzchni samoprzylepnej.

Pakowane pojedynczo i sterylizowane, dzięki czemu można z niego korzystać w sposób higieniczny.



Ochrona miejsca szczepienia

## Użytkowanie

-Ochronna osłona miejsca nakłucia po dializie, wstrzyknięciu dożylnym, pobraniu krwi, szczepieniu oraz iniekcji dostawowej.

## Instrukcje



Otwórz opakowanie



Usuń trzymającą powierzchnię INJECTION PAD, która jest przymocowana do wnętrza opakowania i podkładkę, która pozostaje w części tylnej powierzchni.



Nałożyć na miejsce wkłucia, przytrzymując powierzchnię INJECTION PAD i podkładkę rozdzielającą z tyłu.



Całą część nałożyć na powierzchnię skóry, usuwając warstwę rozdzielającą pozostawioną w części tylnej powierzchni.

## Środki ostrożności

- W razie wystąpienia problemów skórnych (wysypka, zaczerwienienie, pęcherze, łuszczenie się skóry, świąd itp.) lub podejrzenia zakażenia produktu nie należy używać lub należy przerwać jego użytkowanie.
- W razie zaobserwowania wycieku krwi produkt należy natychmiast wymienić.
- Po użyciu powoli oderwać.



Zeskanuj kod QR